



BHV
plus

Postbus 7073

2701 AB Zoetermeer

Lifepak CR + AED

(informatiebron Laerdal)

De LIFEPAK® CR Plus is een automatische externe defibrillator (AED) voor gebruik door de persoon die het eerst bij iemand met een plotseling hartstilstand komt. De halfautomatische CR Plus is bestemd voor mensen met zeer weinig ervaring en vereist slechts drie stappen om een mogelijk levensreddende defibrillatieschok toe te dienen, terwijl er bij de volautomatische CR Plus slechts twee stappen nodig zijn.


De LIFEPAK® CR Plus defibrillator maakt gebruik van de nieuwste ADAPTIV bifasische technologie, waarbij de energie automatisch wordt aangepast aan het energieniveau dat voor het slachtoffer in kwestie nodig is. Mocht het hart niet reageren op de eerste schok dan kan het apparaat additionele schokken toedienen, tot maximaal 360 J. Dit kan de kans op een succesvolle defibrillatie vergroten, met als doel meer levens redden.

Een inwendige computer analyseert het hartritme, waardoor mensen zonder medische opleiding met een druk op de knop een mogelijk levensreddende behandeling kunnen geven. Het rendabele batterijsysteem is licht van gewicht en behoeft weinig onderhoud; het kan 20 tot 30 schokken met een maximale energie toedienen en kan eenvoudig weer opgeladen worden.

Het display geeft de toestand van de CHARGE-PAK™ batterijoplader weer en maakt gebruik van eenvoudige pictogrammen om de status van het apparaat aan te geven. De QUIK-PAK stimulatie-, defibrillatie- en ECG-elektroden kunnen snel gebruikt worden dankzij een uniek en handig openingshandvat en meldingen in geschreven en grafische vorm. De elektroden zijn compatibel met alle apparaten en connectoren die met QUIK-COMBO™-elektroden gebruikt worden.

Het apparaat slaat ECG-gegevens op voor draadloze transmissie naar een pc via een IrDA infrarooduitgang. Deze gegevensopslag- en overdrachtsmethode is het meest innovatieve idee binnen de huidige AED-technologie en het maakt het gebruik van pc-kaarten overbodig.

De gebruiksvriendelijke pc-software zorgt voor een volledig en doelmatig overzicht van zowel de ECG- als gebeurtenisgegevens. De informatie van de CR PLUS kan gedownload en opgeslagen worden in ofwel het LIFENET® DT Express informatiebeheersysteem ofwel het CODE-STAT™ Suite medische informatiesysteem.

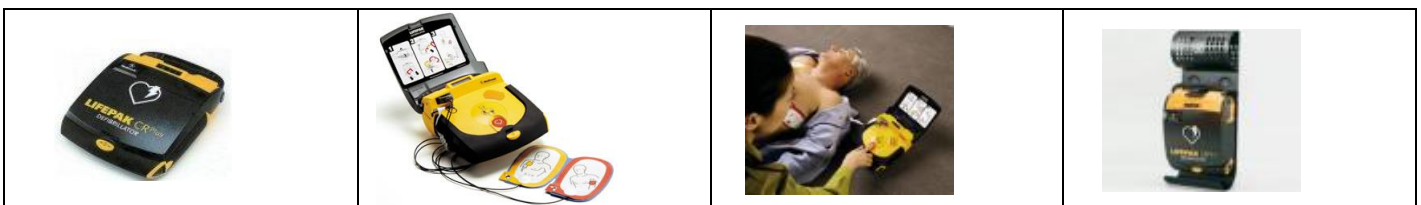

Opleidingen & Trainingen, levering van goederen en betalingsvoorwaarden geschieden op basis van de algemene voorwaarden van BHV Plus, gedeponerd bij de KvK te Haaglanden

Opleidingen, Trainingen, Cursussen en Oefeningen worden gegeven volgens de geldende richtlijnen van de NIBHV, Oranje Kruis, NRR, ERC en NIBRA.

Tel. 079-5938424 ~ Fax. 079-5938425 ~ GSM. Nr. 06-24863839
BTW-nr.1814.32.924 ~ Handelsregister 27246156
Postbank rekening 9188759 ~ ING Bank rekening 67.70.29.780